


Schwangerschaftstest Frühe Erkennung



Für den Selbsttest. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

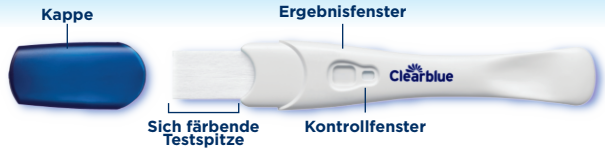

Testen Sie ab
6 Tage
vor
dem Ausbleiben der Periode.!

Wenn Sie früher testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin. Anderenfalls führen Sie den Test zu einer beliebigen Tageszeit durch.



Trinken Sie nicht zu viel Flüssigkeit, bevor Sie testen.

Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 10 Minuten ab.



1 Durchführung des Tests

Entnehmen Sie den Test aus der Folie, entfernen Sie die Kappe und verwenden Sie den Test umgehend. Setzen Sie die sich färbende Testspitze auf:

WICHTIG: Tauchen Sie die Testspitze wie gezeigt vollständig ein.



in
Ihren
Urinstrahl
5 Sekunden

oder



in eine
Urinprobe
20 Sekunden

WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich rasch rosa, um zu zeigen, dass sie Urin aufnimmt. **Beginnen Sie mit der Zeitnahme, sobald Sie sehen, dass sich die sich färbende Testspitze rosa färbt.** Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage. Färbt sich die Testspitze nicht vollständig rosa, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“.

2 Warten



Eine Linie im Kontrollfenster kann sich möglicherweise schnell zeigen, aber Sie müssen **MINDESTENS 3 MINUTEN WARTEN**, bevor Sie Ihr Ergebnis ablesen. Wenn keine blauen Linien erscheinen, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“.

3 Ergebnisse

Schwanger – ist Ihr Ergebnis „Schwanger“, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Bild A



Ergebnisfenster
Kontrollfenster

Bild B



Bild C



Wenn Sie sich noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, siehe Frage 6.

Nicht Schwanger (siehe Frage 2).



ZWEI LINIEN BEDEUTEN, DASS SIE SCHWANGER SIND, UNABHÄNGIG DAVON, OB EINE DER LINIEN HELLER ODER DUNKLER IST ALS DIE ANDERE. Eine blaue Linie muss im Kontrollfenster vorhanden sein, damit Ihr Ergebnis gültig ist. Wenn nicht, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“. **WICHTIG!** Lesen Sie Ihr Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie jegliche Veränderungen nach dieser Zeit.

Frage und Antworten

1 Mein Ergebnis lautet „Schwanger“. Was soll ich tun?
Suchen Sie Ihren Arzt auf und besprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen. Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist, Sie später jedoch feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind (siehe Frage 7).

2 Mein Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“. Was bedeutet das?
Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug. Testen Sie in drei Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

3 Wie früh kann ich testen?
Dieser Test kann ab 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode (5 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode) verwendet werden. Da jedoch der Hormonspiegel von Frau zu Frau unterschiedlich ist und in der Frühschwangerschaft sehr gering sein kann, können Sie schwanger sein und trotzdem ein negatives Ergebnis erhalten. Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der Schwangerschaften, die durch Labortests mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft festgestellt wurden:

Tag vor dem Ausbleiben der Periode	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Erkannte Schwangerschaften	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

4 Wie funktioniert Clearblue?
Der Test erkennt das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin) im Urin. Die Sensitivität des Tests liegt bei 10 mIU/ml. Labortests haben gezeigt, dass der Test ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode zu über 99 % zuverlässig ist.

5 Kann die Einnahme von Medikamenten oder gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?
Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen. Medikamente, die hCG enthalten, und bestimmte seltene Erkrankungen können zu falschen Positiv-Ergebnissen führen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie ein falsches Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind.

Hormontherapien mit Clomiphencitrat, gängige Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antibabypille sollten **KEINE** Auswirkungen auf den Test haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

6 Was ist, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?
Wenn Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Test zwei blaue Linien sehen, sind Sie schwanger, unabhängig davon, ob eine der Linien heller oder dunkler ist als die andere.

Ergebnisse „Schwanger“

Bild A Diese Art der Anzeige ist wahrscheinlicher, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG-Konzentrationen möglicherweise relativ gering sind.

Bild B So kann es aussehen, wenn Sie den Test um den Fälligkeitstag der Periode durchführen, da die hCG-Konzentrationen möglicherweise relativ gering sind.

Bild C So kann es aussehen, wenn Sie den Test mehrere Tage nach dem Ausbleiben Ihrer Periode durchführen, da die hCG-Konzentrationen dann höher sind.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen, und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.

7 Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?
Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist, Sie später jedoch feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind. Dies wird als „früher Schwangerschaftsverlust“ bezeichnet, was nicht selten vorkommt und ungefähr bei 1 von 4 Schwangerschaften auftritt. Die meisten Frauen können danach eine gesunde Schwangerschaft erleben.

8 Gibt es etwas, was ich tun sollte, wenn ich plane, schwanger zu werden?
Es ist eine gute Idee, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Viele Ärzte informieren darüber, dass die Einnahme von Folsäure oder pränatalen Vitaminpräparaten, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie das Halten eines gesunden Körpergewichts sich positiv auswirken können. Sie können auch einen Ovulationstest anwenden, um festzustellen, wann Ihre fruchtbarsten Tage sind. Clearblue bietet eine Reihe von Produkten an, die Ihnen helfen, Ihre Chancen auf eine Empfängnis zu erhöhen.

! Testfehler

Die sich färbende Testspitze färbt sich nicht vollständig rosa.
Sie haben möglicherweise nicht genug Urin aufgetragen. Sie können jedoch sicher sein, dass der Test funktioniert hat, wenn die Kontrolllinie innerhalb von 10 Minuten nach dem Test erscheint.

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Test erscheint keine blaue Linie im Kontrollfenster.

Der Test hat nicht funktioniert, möglicherweise weil zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde. Testen Sie erneut mit einem neuen Test und befolgen Sie dabei sorgfältig die Anweisungen.

Ergebnisfenster

Kontrollfenster



www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00-16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

0800 102 865 Anrufe sind kostenlos. Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie Ihr Produkt und all dessen Verpackungen bereit, wenn Sie uns anrufen.

Anleitung für Clearblue Frühe Erkennung, mit Aufdruck „CB14“ auf der Packung. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik. Nicht zur inneren Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Entsorgung im normalen Hausmüll. Gerät nicht auseinandernehmen. Enthält

Kleinteile. Keine Teile des Geräts verschlucken. Falls Teile des Geräts versehentlich verschluckt wurden, einen Arzt aufsuchen. Melden Sie jegliche Verletzung, die durch die Verwendung dieses Produkts von Clearblue verursacht wurde.

179 % der Ergebnisse „Schwanger“ können 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode erkannt werden (5 Tage vor Fälligkeit der Periode).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.

LOT	Batch-Code	IVD	Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik	Hersteller
Verfallsdatum	Temperaturbegrenzung 2 °C bis 30 °C	⊗	Nicht wiederverwenden	

Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2022 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

