Clearblue®

Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung



DEUTSCH

Für den Selbsttest. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen automatisierten Selbsttest für die Heimanwendung zum halbquantitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin einer Frau zur Feststellung einer Schwangerschaft. Bei positivem Ergebnis zeigt Ihnen das Produkt auch die Wochen seit der Empfängnis wie folgt an: 1-2, 2-3 oder über 3 Wochen (3+). Vorgesehen zur Anwendung ab 5 Tagen vor dem Ausbleiben der Periode (4 Tage vor der Fälligkeit der Periode).

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
Anleitung für einen Test mit dem Aufdruck „CB9A002C“ auf der Verpackung. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Nicht zur inneren Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Sobald die Folie geöffnet ist, sofort verwenden. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Dieses Produkt enthält Batterien. Dieses Produkt ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Enthält Kleinteile. Keine Bestandteile dieses Geräts schlucken. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen. Melden Sie jegliche Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht wurden, an Clearblue und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats.

Über 99 % zuverlässig bei der Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode

Wenn Sie früher testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin Andernfalls können Sie den Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen

Nehmen Sie nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich, bevor Sie testen

Halten Sie das Teststäbchen niemals mit der Testspitze nach oben

1 Durchführung des Tests

Erforderliche, aber nicht enthaltene Materialien: Ein sauberer, trockener Behälter, wenn das Teststäbchen eingetaucht werden soll, und eine Stoppuhr. Entnehmen Sie den Test aus der Folie, entfernen Sie die Kappe und verwenden Sie den Test umgehend. Testen Sie **entweder**:



oder



Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage.

2 Warten




Das Symbol „Warten“ blinkt, um anzuzeigen, dass der Test funktioniert, und Ihr Ergebnis wird in 1–3 Minuten angezeigt.


Wenn das Symbol „Warten“ nicht erscheint, siehe „Testfehler“.

3 Ablesen Ihres Ergebnisses


Das Ergebnis „Schwanger“ kann auf dem Display angezeigt werden, bevor das Ergebnis der Wochenbestimmung erscheint.

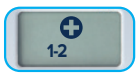

Die Empfängnis fand vor etwa 1 bis 2 Wochen statt. Ihr Arzt wird dies als 3. bis 4. Schwangerschaftswoche datieren.

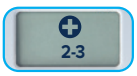

Die Empfängnis fand vor etwa 2 bis 3 Wochen statt. Ihr Arzt wird dies als 4. bis 5. Schwangerschaftswoche datieren.

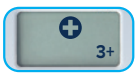

Die Empfängnis fand vor über 3 Wochen statt. Ihr Arzt wird dies als 5+ Schwangerschaftswochen datieren.



Wenn Sie das Ergebnis **Schwanger** erhalten haben, lesen Sie Frage 2.

Die Wochenbestimmung erfolgt bei einer vorliegenden Schwangerschaft mit einer Zuverlässigkeit von 93 % (siehe Frage 3). Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaft nach einer anderen Methode datieren, die auf dem ersten Tag Ihrer letzten Periode basiert.

Wenn Sie das Ergebnis **Nicht Schwanger** erhalten haben, lesen Sie Frage 4.

? Fragen und Antworten

1. **Wann sollte ich testen?** Verwenden Sie für ein genaues Ergebnis der Wochenbestimmung oder wenn Sie früher testen den Morgenurin.
2. **Mein Ergebnis lautet „Schwanger“. Was soll ich tun?** Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen. **Clearblue mit Wochenbestimmung ist über 99 % zuverlässig bei der Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode.** Das Ergebnis „Schwanger“ bleibt etwa 24 Stunden auf dem Display ablesbar.
3. **Wie zuverlässig ist die Wochenbestimmung?** Die Wochenbestimmung erfolgt bei einer vorliegenden Schwangerschaft mit einer Zuverlässigkeit von 93 %, wenn Sie mit dem Morgenurin testen. Die Empfängnis findet etwa 2 Wochen vor Fälligkeit der nächsten Periode statt. Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaft nach einer anderen Methode datieren, die auf dem ersten Tag Ihrer letzten Periode basiert (basierend auf einem 28-Tage-Zyklus).
4. **Mein Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“. Was bedeutet das?** Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug. Wenn Sie dennoch davon ausgehen, dass Sie schwanger sein könnten, testen Sie nach drei Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
5. **Wie früh kann ich testen?** Dieser Test kann ab 5 Tagen vor dem Ausbleiben der Periode angewendet werden (4 Tage vor der Fälligkeit der Periode).* Da der Hormonspiegel jedoch von Frau zu Frau variiert und in der Frühschwangerschaft sehr niedrig sein kann, kann es sein, dass Sie schwanger sind, aber dennoch ein negatives Ergebnis erhalten. Die folgende Tabelle zeigt den Prozentsatz der Schwangerschaften, die bei Labortests mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft erkannt wurden:

Tage vor dem Ausbleiben der Periode	-1	-2	-3	-4	-5
Erkannte Schwangerschaften	>99 %	99 %	99 %	97 %	80 %

6. **Wie funktioniert Clearblue mit Wochenbestimmung?** Der Test weist halbquantitativ das Schwangerschaftshormon hCG im Urin einer Frau nach und zeigt den ungefähren Zeitpunkt der Empfängnis an. Die Urinprobe wird von der Geräteelektronik gemessen und interpretiert, anschließend wird das Endergebnis angezeigt. Der Test ist über 99 % zuverlässig bei der Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode.
7. **Kann die Einnahme von Medikamenten oder gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?** Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen. Medikamente, die hCG enthalten, und bestimmte seltene Erkrankungen können zu falschen Positiv-Ergebnissen führen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. Hormontherapien mit Clomiphencitrat, gängige Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antibabypille sollten **KEINE** Auswirkungen auf den Test haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren. Multiple Schwangerschaften und Eileiterschwangerschaften können zu irreführenden Ergebnissen der Wochenbestimmung führen.
8. **Kann etwas anderes das Ergebnis beeinflussen?** Die Wochenbestimmung kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn der Test mehr als 6 Wochen nach der Empfängnis durchgeführt wird, da der hCG-Spiegel im Urin zu hoch ist, um eine genaue Schätzung der Zeit seit der Empfängnis zu ermöglichen.
9. **Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?** Es ist möglich, dass ein positives Ergebnis angezeigt wird und Sie später feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind. Dies wird als „früher Schwangerschaftsverlust“ bezeichnet, was ungefähr bei 1 von 4 Schwangerschaften auftritt. Die meisten Frauen haben anschließend eine gesunde Schwangerschaft.
10. **Ich habe den Test erneut durchgeführt, und das Ergebnis der Wochenbestimmung zeigt eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was bedeutet das?** Der Anstieg der hCG-Konzentration kann Schwankungen unterliegen. Daher ist es möglich, dass Ihnen die Wochenbestimmung bei Tests an aufeinanderfolgenden Tagen unerwartete Ergebnisse anzeigt. Sie sollten mindestens 5 Tage warten, bevor Sie den Test wiederholen. Verwenden Sie auch dann den Morgenurin. Wenn seit dem letzten Test mehr als 5 Tage vergangen sind und die Wochenbestimmung eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis anzeigt, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Entsorgung des Tests
Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Teststäbchen entsorgen. Recyceln Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Zur Entnahme der Batterie eine Münze in den Schlitz am Ende des Tests einsetzen und drehen, um die Rückseite des Tests aufzubrechen. Sollte die Batterie nicht sichtbar sein, dann lassen Sie den Batteriehalter aus dem Test in Richtung des gezeigten Pfeils gleiten, um so die Entnahme zu erleichtern.
Warnung: Die Batterien nicht auseinandernehmen, wiederaufladen oder ins Feuer werfen. Den Rest des Tests gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten recyceln. Elektronische Geräte nicht ins Feuer werfen.

! Testfehler

Fehlersymbol „Buch“



Beim Testen ist ein Fehler aufgetreten. Es kann sein, dass:
- die saugfähige Testspitze nicht nach unten gehalten wurde
- der Test nach Aufnahme des Urins nicht auf eine flache Unterlage gelegt wurde
- die Testspitze zu viel oder zu wenig Urin aufgenommen hat

Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test und halten Sie sich genau an die Anweisungen.

Fehler: kein Ergebnis



Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sie müssen einen weiteren Test durchführen. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test und halten Sie sich genau an die Anweisungen.

Leistungsmerkmale
Klinische Leistung:
Klinische Leistungstests haben gezeigt, dass der Test mit einer Zuverlässigkeit von >99 % den Schwangerschaftsstatus ab dem Fälligkeitstag der Periode bestimmt.
- 5652 klinische Proben (2727 von nicht schwangeren und 2925 von schwangeren Frauen), die in zwei Studien getestet wurden, zeigten eine >99%ige Übereinstimmung zwischen Schwangerschaftsstatus und Ergebnis des Schwangerschaftstests.
- 3076 klinische Proben von 131 Probanden wurden getestet, wobei sich herausstellte, dass das Ergebnis der Wochenbestimmung im Vergleich zur Datierung nach Ultraschall und LH-Anstieg eine Zuverlässigkeit von 93 % aufweist.
- Die Zuverlässigkeit von 93 % basiert auf der niedrigsten Übereinstimmung für den Indikatorbereich von 2-3 Wochen. Die Gesamtübereinstimmung (d. h. unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Übereinstimmung über die Indikatorbereiche 1-2, 2-3 und 3+ hinweg) wurde mit 97 % berechnet.

Analytische Leistung:
Die analytische Spezifität wurde durch Tests des Produkts mit potenziell störenden oder kreuzreagierenden Substanzen festgestellt. Die Ergebnisse bestätigten, dass hohe Konzentrationen dieser Substanzen die Leistung des Tests nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch für hohe Werte des hCG-beta-Core-Fragments, sehr hohe Werte von intaktem hCG, eine Reihe von spezifischen Gravitäten oder den pH-Wert des Urins. Eine Präzisionsstudie hat gezeigt, dass die analytische Empfindlichkeit des Geräts 25 mIU/ml beträgt.

www.clearblue.com
Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 bis 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.
DE 0800 589 4015 · AT 0800 070 359 · CH 0800 102 865 Anrufe sind kostenlos.
Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Dieses digitale IVD-Gerät erfüllt bezüglich Emissionen und Störfestigkeit die Anforderungen der Norm EN 61326-2-6. Die beim elektronischen Instrument angewandten EMV-Gegenmaßnahmen bieten einen angemessenen Schutz vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Störungen, die in einer häuslichen Umgebung auftreten können. Der folgende vorbeugende Warnhinweis bezieht sich auf Geräte, die die Norm EN 61326-2-6 erfüllen.
a) Die Verwendung dieses Geräts in einer trockenen Umgebung kann, insbesondere bei Vorhandensein von synthetischen Materialien (Kleidung und Teppiche aus Kunststofffasern usw.), zu schädlichen statischen Entladungen und somit zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
b) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. Mobiltelefone) verwenden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können.

Literatur
1. Perrier d'Hauterive S, *et al.* Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.
*80 % der Ergebnisse „Schwanger“ können 5 Tage vor dem Ausbleiben der Periode erkannt werden (4 Tage vor Fälligkeit der Periode).

IVD	Medizinisches Produkt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-Code		Hersteller
	Verfallsdatum		Nicht wiederverwenden		Temperaturbegrenzung 2 °C – 30 °C
	Nicht im Hausmüll entsorgen	EU REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Union	UDI	eindeutige Produktidentifikation

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.

Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2026 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

2300787.00 06-2026

CE 0123